

# CLINITEST®

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

## STRUČNÁ REFERENČNÁ PRÍRUCKA

### DÔLEŽITÉ

- Tento test sa môže použiť počas prvých desiatich dní, keď sa objavia príznaky typické pre COVID-19.
- Tento test je schválený na použitie doma osobami vo veku od 12 rokov. Vzorky výteru z nosa od osôb mladších ako 12 rokov alebo starších ako 70 rokov by mali odoberať dospelé osoby alebo podľa ľadom dospehlých osôb.
- Test bude trvať približne 5 minút a jeho výsledky je potrebné odčítať o 15 minút.
- Aby ste dosiahli správny výsledok, je dôležité dôsledne postupovať podľa pokynov.
- Testovanie jednotka a plávavý roztok musia mať pred začiatom testu izbovú teplotu (15 - 30 °C).
- Pred a po vykonaní testu si umyte alebo dezinfikujte ruky.
- Pri testovaní iných osôb vykonajte potrebné bezpečnostné opatrenia (napr. maska, rukavice).

Ak máte otázky týkajúce sa použitia testu alebo odčítania výsledkov, obráťte sa na zákaznícku podporu.

Internet: [www.clinitest.siemens-healthineers.com](http://www.clinitest.siemens-healthineers.com)


### ZACÍNAME

Obsah súpravy

- Sterilných tampónov (5)
- Testovacích jednotiek (5)
- Extrakrátnych skúmaviek s pufrom a špičkami (5)
- Návod na použitie (1)
- Stručná referenčná príručka (1)

### POTREBNÉ POLOŽKY, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY

Horiny, časovač alebo stopky a igelitové vrecko na odpad.

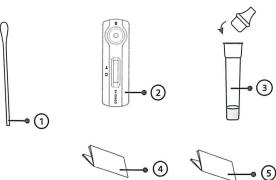

## TESTOVACÍ POSTUP



**Krok 1**  
Vložte skúmavku do pracovnej stanice. Z vrchnej časti skúmavky zložte veko.



**Krok 4**  
Tampón pretočte najmenej 5-krát vo vnútornej časti nosnej dierky. Zaisťte dobrý kontakt medzi tampónom a vnútornou časťou nosnej dierky.



**Krok 5**  
Vyberte tampón a vložte ho do pravej nosnej dierky. Zopakujte kroky 3 a 4.

**Krok 10**  
Vyberte tampón a vložte ho do plastového vrecka.




**Krok 11**  
Špička dodaná v súprave zasúňte do skúmavky a uistite sa, že pevne prileha.

**Krok 15**  
Odčítajte si výsledky. Existujú tri možné typy výsledkov.

### Positívny výsledok testu




Ak testovacia jednotka vyzerá ako jedno z okien s pozitívnym výsledkom zobrazených vľavo, aktuálne máte infekciu COVID-19. Zavolajte svojmu lekárovi alebo do miestneho zdravotníckeho strediska aubezpečte sa, že sledujete miestne pokyny pre izoláciu. Môže byť potrebné opäťovné testovanie pomocou iných testovacích metod, ak je napríklad test PCR.

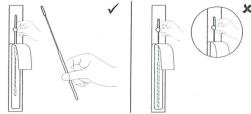

**Krok 2**  
Obal s tampónom otvorte na určenom mieste. Uchopte pláštový koniec a vytiahnite tampón. Nedotýkajte sa špičky absorpčného tampónu.



**Krok 6**  
Vyberte si tampón z nosnej dierky a vložte ho do prípravenej skúmavky v pracovnej stanici.

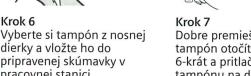

**Krok 7**  
Dobre premiešajte tak, že tampón otôčte najmenej 6-krát a pritačíte hlavu tampónu na dno a boky skúmavky.



**Krok 12**  
Vyberte testovaciu jednotku z obalu a položte ju na rovný čistý povrch.



**Krok 13**  
Stlačením skúmavky pridať 4 kvapky roztoku do jamky na vzorku na testovacej jednotke.




**Krok 14**  
Spusťte časovač a odčítajte výsledky o 15 minút. Je dôležité odčítať výsledky o 15 minút.



**Krok 3**  
Opatrne vložte absorpčný koniec tampónu do ľavej nosnej dierky. Uistite sa, že celý koniec tampónu je vo vnútri nosnej dierky (2-4 cm hĺbko). Potom, ak počkáte odpor, tampon dalej nevsuvajte.



**Krok 8**  
Spusťte časovač. Nechajte tampon v skúmavke 1 minútu.


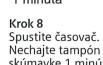


**Krok 9**  
Skúmavku zvonku niekol'kokrát stlačte. Pokúste sa z tamponu uvoľniť čo najviac roztoku.



**Krok 15**  
Spusťte časovač a odčítajte výsledky o 15 minút. Je dôležité odčítať výsledky o 15 minút.

### Neplatný výsledok testu

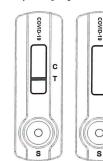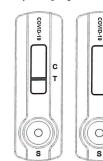

Ak výsledok testu vyzerá inak, čo znamená, že na T nie je viditeľná žiadna clara alebo len jedna, výsledok je neplatný. Možé to byť dôsledok spôsobu využívania testu a test by sa mal opakovať.

Ak budú výsledky testu aj nadľa negatívne, obráťte sa na svojho lekára alebo na COVID testovacie centrum.



## REGISTER SYMBOLOV

|  |  |  |                        |  |                        |
|--|--|--|------------------------|--|------------------------|
|  | Pozrite si návod na použitie           |  | Počet testov v súprave |  | Autorizovaný zástupca  |
|  | Len na diagnostické použitie in vitro. |  | Datum expiracie        |  | Opakovane nepoužívajte |
|  | Uchovávajte pri teplote 2 - 30 °C      |  | Číslo súťaže           |  | Katalógové č.:         |

Healgen Scientific Limited Liability Company  
Adresa: 3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA.  
Tel.: +1 713-733-8088 Fax: +1 713-733-8848  
Webová stránka: [www.healgen.com](http://www.healgen.com)

**EC REP** Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)  
Adresa: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Nemecko  
**REF** GCCOV-502a-H5  
(11556327)